

# Fairywill

## Sonická zubná kefka FW-P80



## NÁVOD NA POUŽITIE


Ďakujeme, že ste si vybrali sonickú zubnú kefku Fairywill P80. Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte návod na použitie a uschovajte ho na bezpečnom mieste pre budúce použitie.

# 1. Vlastnosti:

- Vodotesná a protišmyková konštrukcia.
- Náhradné hlavice kefky s jedinečným 3D tvarom štetín a funkciou pripomínajúcou výmenu štetín pomáhajú udržiavať belšie a zdravšie zuby.
- Vysokofrekvenčné vibrácie účinne odstraňujú zubný povlak, zabezpečujú hĺbkové čistenie zubov a ďasien a zabraňujú zápalu ďasien.
- Vďaka indikátoru tlaku používateľa vedia, kedy je tlak príliš silný pre ich zuby.
- Nabíjanie cez USB, vhodné na cestovanie a kompatibilné s globálnym napätím.
- Funkcia upozornenia na nízku spotrebu energie, keď je napätie batérie nízke, indikátor bude rýchlo blikať alebo sa zubná kefka nebude môcť počas používania zapnúť, čo vám pripomenie, aby ste zubnú kefku dobili.
- Inteligentný 2-minútový časovač s intervalovou pauzou, ktorý vám každých 30 sekúnd pripomenie zmenu miesta čistenia.
- K dispozícii je 5 režimov: V zubnej kefke je zabudované nastavenie White, Clean, Sensitive, Polish a Massage. V zubnej kefke je zabudovaná aj funkcia pamäte režimov, čo znamená, že po zapnutí zubnej kefky zostane predvolený počítačový režim rovnaký ako režim nastavený pri poslednom vypnutí zubnej kefky.

## 2. Prvky štetca:

- 1 - Hlava kefky
- 2 - Indikátor tlaku
- 3 - Tlačidlo ON/OFF
- 4 - Biela
- 5 - Čistota
- 6 - Citlivé
- 7 - Leštenie (leštenie)
- 8 - Masáž
- 9 - Indikátor nabíjania
- 10 - Nabíjací port

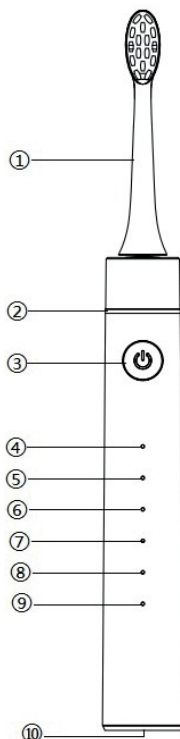

## 3. Činnosti spojené s používaním zubnej kefky:

### ☆ Používanie zubnej kefky

- Hlavu kefy zasuňte do rukoväte a skontrolujte, či je zaistená v správnej polohe.
- Zubnú kefku zapnite stlačením tlačidla "Power".
- Stlačením tlačidla "Power" môžete prepínať medzi 5 režimami ("White", "Clean", "Sensitive", "Polish" a "Mas- sage").
- Navlhčite štetiny zubnej kefky a naneste primerané množstvo zubnej pasty.
- Priložte štetiny zubnej pasty k zubom pod miernym uhlom smerom k línii ďasien.
- Hlavou kefky jemne prechádzajte po predných, zadných a všetkých žuvacích plochách zubov. Zubná kefka by mala kĺzať po zuboch s minimálnym tlakom. Nevyvíjajte príliš veľký tlak na zuby/ďasne ani neprikladajte štetiny na jednu oblasť ústnej dutiny na dlhší čas.

- Ak je tlak na zuby používateľa  $\geq 250$  g, indikátor tlaku sa rozsvieti červenou farbou, aby používateľovi pripomenul, že má byť pri čistení opatrný alebo má zmeniť režim, ktorý mu vyhovuje.

- Zubná kefka je vybavená 2-minútovým inteligentným časovačom, pretože tento čas odporúčajú zubní lekári ako optimálny čas na čistenie zubov, a po každých 30 sekundách sa zobrazí pauza, ktorá vám pripomenie, aby ste prešli na iný kvadrant ústnej dutiny.

- Keď pocítite pauzu, prejdite na ďalšiu časť a zubná kefka sa po 2 minútach automaticky vypne.

- Aby ste sa vyhli postriekaniu zubnou pastou, zapínajte zubnú kefku len vtedy, keď si ju priložíte k zubom, a vyberte ju z úst až vtedy, keď ju vypnete.

### ☆ Výmena hlavy zubnej kefy

Inštalácia: Zatláčajte hlavu kefy smerom nadol k rukoväti. Uistite sa, že je v správnej polohe.

Odmontovanie: Pevne držte rukoväť a potom vytiahnite hlavu kefy z rukoväte.

### ☆ Nabíjanie zubnej kefy

- Ak sa pri prvom zapnutí zubnej kefy zobrazí slabá batéria, pred použitím sa uistite, že je plne nabitá.

- Ak sa zubná kefka nepoužívala dlhšie ako 3 mesiace, pred použitím by sa mala úplne nabiť podľa pokynov na nabíjanie.

- Ak indikátor počas prevádzky rýchlo bliká, znamená to, že zubná kefka má slabé nabitie batérie a treba ju čo najskôr dobiť.

- Keď chcete zubnú kefku nabíjať, vložte kábel USB do nabíjacieho portu na spodnej strane zubnej kefy a uistite sa, že je zubná kefka bezpečne pripojená k elektrickej sieti.

- Počas nabíjania sa indikátor nabíjania rozsvieti na bielo a pomaly bliká.

Keď je batéria úplne nabitá, indikátor sa rozsvieti

dve minúty a prestane blikať a po dvoch minútach sa automaticky vypne. Po úplnom nabití zubnej kefky ju možno používať dve minúty na jedno sedenie, dvakrát denne počas 30 dní.

- Zubná kefka je vybavená funkciou vodotesnosti, takže je bezpečná na používanie v kúpeľni.

## ☆ Režimy

- Prvý režim: Biela

V tomto režime sa biela kontrolka rozsvieti v polohe "White", náklon zubnej kefky je vysoký a intenzita vibrácií je najsilnejšia. Je vhodný pre používateľov, ktorí majú vysoké požiadavky na čistiaci výkon a nemajú citlivé zuby.

- Druhý režim: Clean

V tomto režime sa v polohe "Clean" rozsvieti biela kontrolka, pohyb kefy je normálny a intenzita vibrácií je stredná. Je vhodný pre štandardný stav ústnej dutiny na dosiahnutie najsilnejšieho čistiaceho účinku a udržiavanie zdravej ústnej hygieny.

- Tretí režim: Citlivý

V tomto režime sa v polohe "Sensitive" rozsvieti biely indikátor, pohyb kefky je jemný a intenzita vibrácií je najjemnejšia zo všetkých piatich režimov, čo je vhodné pre používateľov s citlivými zubami.

- Štvrtý režim: Poľský

V tomto režime sa rozsvieti biela kontrolka v polohe "Polish", pohyb štetín a intenzita vibrácií sa rýchlo mení. Simulovaný efekt možno použiť na dodatočné ošetrovanie oblasti rezákov, čo vedie k bieliacemu efektu.

- Piaty režim: Masáž

V tomto režime sa rozsvieti biela kontrolka v polohe "Masáž" a pohyby štetín a intenzita vibrácií sa pomaly menia.

Tento režim sa používa na jemnú stimuláciu na udržanie silných a zdravých ďasien.

## **4. Špecifikácia:**

Prevádzková teplota: 0-50 °C

Prevádzkové napätie: DC3,7 V

Materiál štetín: Nylon Vstupné

napätie: DC5,0 V

Menovitý výkon: 2 W

Hodnotenie vodotesnosti: IPX7

## **5. Bezpečnostné opatrenia:**

- Výrobok nerozoberajte, neopravujte ani neupravujte bez oprávnenia.
- Ľudia so závažným ochorením parodontu alebo po operácii ústnej dutiny by sa mali pred použitím poradiť s lekárom.
- Deti, dojčatá a nespôsobilé osoby by mali byť pod dohľadom rodiča alebo dospeljej osoby.
- Výrobok nenamáčajte do vody na dlhší čas.
- Zubnú kefku neumiestňujte do horúcich priestorov ani ju nevystavujte slnečnému žiareniu.
- Netlačte štetiny pevne na zuby alebo ďasná.
- Nevhodné pre deti mladšie ako 12 rokov.

## Ochrana životného prostredia



Elektronický odpad označený v súlade so smernicou Európskej únie sa nesmie ukladať spolu s iným komunálnym odpadom. Podlieha separovanému zberu a recyklácii na určených miestach. Zabezpečením jeho správnej likvidácie predídete možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia pre likvidáciu odpadu. Podrobné informácie na túto tému získate na obecnom úrade, v čističke alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.

CE Výrobok spĺňa požiadavky tzv. smerníc nového prístupu Európskej únie (EÚ), ktoré sa zaoberajú otázkami týkajúcimi sa bezpečnosti prevádzky, ochrany zdravia a ochrany životného prostredia a stanovujú nebezpečenstvá, ktoré sa majú zistiť a odstraňovať.

Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na obsluhu, ktorý vytvoril výrobca.

Výrobok musí pravidelne udržiavať (čistiť) sám používateľ alebo špecializované servisné strediská na náklady používateľa. Ak v návode na obsluhu nie sú uvedené informácie o potrebnej cyklickej údržbe alebo servisných úkonoch, musí sa pravidelne, najmenej raz týždenne, posudzovať odchýlka fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Ak sa zistí alebo nájde akákoľvek odchýlka, musia sa urýchlene vykonať údržbové (čistiace) alebo servisné opatrenia. Ak sa nevykoná správna údržba (čistenie) a nereaguje sa na zistenie odlišného stavu, môže dôjsť k trvalému poškodeniu výrobku. Garant nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku nedbalosti.

### Pre batérie LI-ION

Zariadenie je vybavené lítium-iónovou batériou LI ION, ktorá v dôsledku svojej fyzikálnej a chemickej štruktúry časom a používaním starne. Výrobca udáva maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, kde sú optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenie a samotná batéria je nová a plne nabitá. Prevádzkový čas sa v skutočnosti môže líšiť od času deklarovaného v ponuke, čo nie je vada zariadenia, ale vlastnosť výrobku. V záujme zachovania maximálnej životnosti batérie sa neodporúča vybiť batériu na menej ako 3,18 V alebo 15 % celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napríklad 2,5 V pre článok, ho trvalo poškodia a nevzťahuje sa na to záruka. Ak batériu alebo celé zariadenie nepoužívate dlhšie ako jeden mesiac, nabite batériu na 50% a pravidelne každé dva mesiace kontrolujte úroveň jej nabitia. Batériu a zariadenie skladujte na suchom mieste, mimo dosahu slnka a negatívnych teplôt.

### Pre batérie LIPO

Zariadenie je vybavené batériou LI PO (lítiový polymér), ktorá vďaka svojej fyzikálnej a chemickej štruktúre časom a používaním starne. Výrobca udáva maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, kde existujú optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenie a samotná batéria je nová a plne nabitá. Prevádzkový čas sa v skutočnosti môže líšiť od času deklarovaného v ponuke, čo nie je vada zariadenia, ale vlastnosť výrobku. V záujme zachovania maximálnej životnosti batérie sa neodporúča vybiť batériu na menej ako 3,5 V alebo 5 % celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napríklad 3,2 V pre článok, ho trvalo poškodia a nevzťahuje sa na to záruka. Ak batériu alebo celé zariadenie nepoužívate dlhšie ako jeden mesiac, nabite batériu na 50% a pravidelne každé dva mesiace kontrolujte úroveň jej nabitia. Batériu a zariadenie skladujte na suchom mieste, mimo dosahu slnka a negatívnych teplôt.